



Cathéters vasculaires et accessoires





Avant-propos

Madame, Monsieur,

medimex GmbH propose depuis plus de 50 ans des produits exclusifs dans le domaine médical.

Nous souhaitons continuer à satisfaire à vos besoins à l'aide d'innovations, d'une qualité exceptionnelle et avant tout grâce à un service à la mesure de vos exigences. Avec le soutien d'un réseau de collaborateurs compétents, nous sommes votre partenaire de confiance en salle d'opération.

Les conseils avisés, la flexibilité et l'engagement de nos partenaires dans le commerce spécialisé vous apporteront entière satisfaction.

Dans ce catalogue, nous aimerions vous présenter notre gamme de produits pour les cathéters vasculaires et accessoires.

N'hésitez pas à visiter notre site Web www.medimex.de pour découvrir l'ensemble de nos produits.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix et les commandes, veuillez contacter un de nos revendeurs ou le service clients par

téléphone : +49.6431.7302.300

e-mail : kontakt@medimex.de

Nous nous réjouissons par avance de notre excellente collaboration.

L'équipe medimex

Cathéters vasculaires et accessoires



Fogarty® Cathéters vasculaires

Cathéters d'embolctomie artérielle



Cathéters d'embolctomie artérielle - Emballage long standard

Le cathéter standard pour la thrombectomie artérielle

- Avec code couleur

1	Code d'indication	Couleur	Longueur [cm]	Taille du cathéter (F)	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	EMB	violet	60	2	5	12-060-2FP	345010
	EMB	vert	40	3	5	12-040-3FSP	345130
	EMB	vert	80	3	5	12-080-3FSP	346590
	EMB	blanc	80	5	5	12-080-5FP	345030
	EMB	bleu	80	6	5	12-080-6FP	345040
	EMB	jaune	80	7	5	12-080-7FP	345050

Fogarty® Cathéters vasculaires

Cathéters d’embolectomie artérielle FORTIS™



Cathéters d’embolectomie artérielle FORTIS™


Le cathéter Fogarty® FORTIS™ a été spécialement conçu pour une utilisation au niveau fémoral, lorsqu’une force de traction accrue est nécessaire en cas d’occlusion thrombotique.

- Tige améliorée grâce à la nouvelle matière plastique PEBAX
 - Nouvelle conception de l’extrémité du cathéter
- Plus grande épaisseur de la matière du ballonnet (latex)
 - Avec code couleur

1	Code d’indication	Couleur	Longueur [cm]	Taille du cathéter (F)	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d’article
	EMB	rouge/gris 	40	4	5	12-040-4FFP	348840
	EMB	rouge/gris 	80	4	5	12-080-4FFP	348830

Fogarty® Cathéters vasculaires

Cathéters d'occlusion

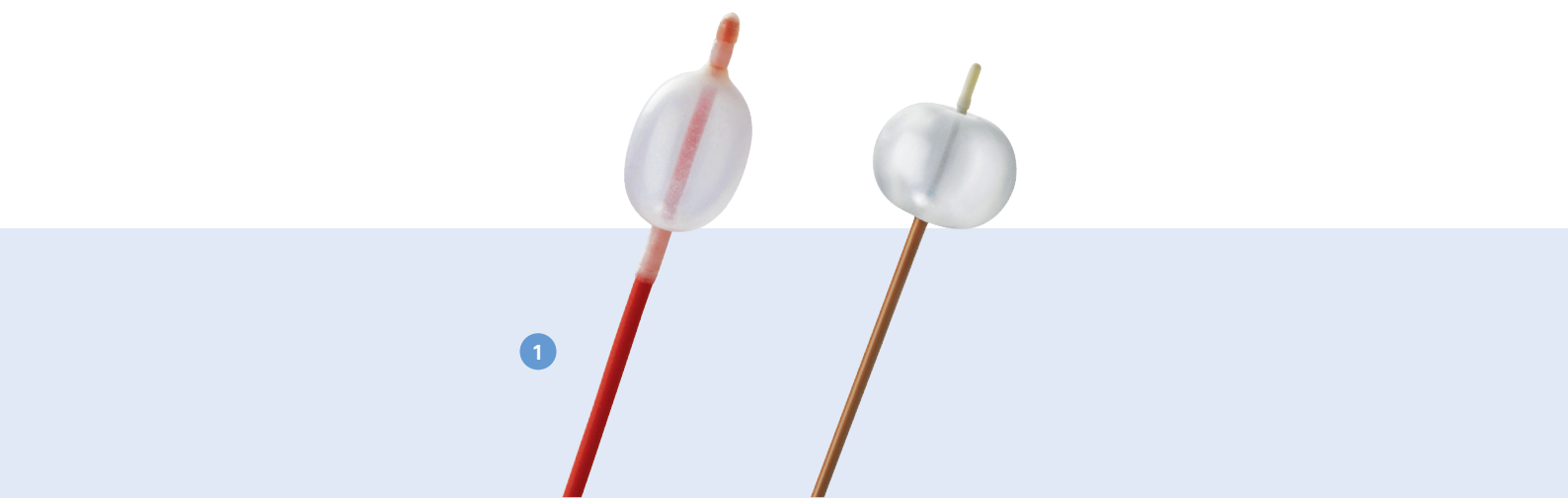

Cathéters d'occlusion


Pour une occlusion temporaire, rapide et simplement atraumatique des vaisseaux au moyen d'un cathéter à ballonnet.

- Avec valve d'arrêt
- Avec code couleur

1	Code d'indication	Couleur	Longueur [cm]	Taille du cathéter (F)	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	OCC	vert	40	3	1	62-040-3F	345170
	OCC	rouge	40	4	1	62-040-4F	345340
	OCC	blanc	40	5	1	62-040-5F	345350
	OCC	marron	80	8	1	62-080-8/14F	345120
	OCC	marron	80	8	1	62-080-8/22F	345110

Fogarty® Cathéters vasculaires

Cathéters de thrombectomie veineuse

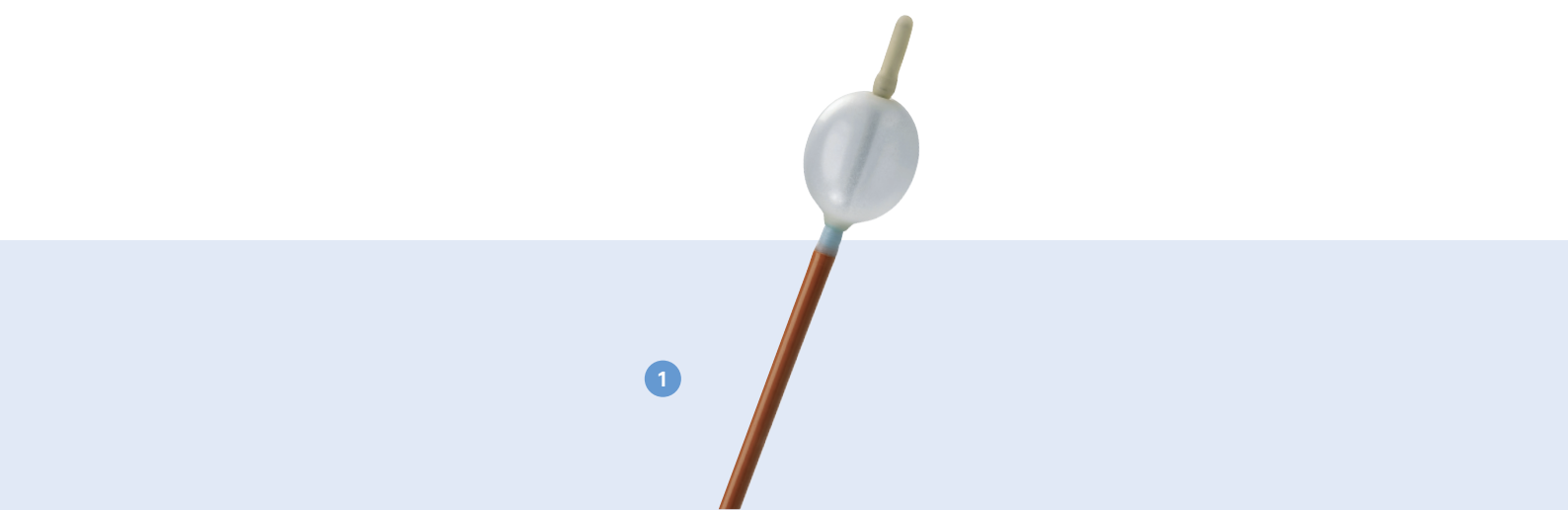

Cathéters de thrombectomie veineuse

Pour les thrombectomies veineuses, équipés d'une extrémité souple, extra longue. Conviennent également pour les occlusions temporaires.

- Avec valve d'arrêt
- Avec code couleur

1	Code d'indication	Couleur	Longueur [cm]	Taille du cathéter (F)	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	THB	bleu 	80	6	1	32-080-6F	345150
	THB	marron 	80	8	1	32-080-8F	345180
	THB	marron 	80	8	1	32-080-8/10F	345080

Fogarty® Cathéters vasculaires

Cathéters à ballonnet pour voies biliaires



Cathéters à ballonnet pour voies biliaires

Pour l'extraction de calculs et de boue biliaire des canaux biliaires ainsi que pour l'exécution de procédures diagnostiques.

- Avec code couleur

1

Code d'indication	Couleur	Longueur [cm]	Taille du cathéter (F)	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
BBP	blanc 	23	5	5	41-023-5FP	345090
BBP	blanc 	40	5	5	41-040-5FP	345160
BBP	bleu 	23	6	5	41-023-6FP	345100

Fogarty® Cathéters vasculaires

Cathéters d’embolectomie à lumière traversante



Cathéters d’embolectomie à lumière traversante

Le cathéter standard pour une thrombectomie ciblée via un fil guide. En outre, irrigation, utilisation de produits de contraste ou lyse locale par l’ouverture distale ainsi qu’occlusion temporaire des vaisseaux.

- Avec valve d’arrêt et port de ballonnet
- Avec code couleur

1	Code d’indication	Couleur	Longueur [cm]	Taille du cathéter (F)	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d’article
	TL/EMB	vert 	40	3	1	12TLW-40-3F	345430
	TL/EMB	vert 	80	3	1	12TLW-80-3F	345440
	TL/EMB	rouge 	40	4	1	12TLW-40-4F	345360
	TL/EMB	rouge 	80	4	1	12TLW-80-4F	345450
	TL/EMB	blanc 	40	5	1	12TLW-40-5F35	345381
	TL/EMB	blanc 	80	5	1	12TLW-80-5F35	345391
	TL/EMB	bleu 	40	6	1	12TLW-40-6F	345400
	TL/EMB	bleu 	80	6	1	12TLW-80-6F	345410
	TL/EMB	jaune 	80	7	1	12TLW-80-7F	345420

Fogarty® Cathéters vasculaires

Cathéters pour caillot adhérent



Cathéters pour caillot adhérent

Pour l'élimination du matériel thrombotique adhérent des artères ou des prothèses vasculaires synthétiques (ePTFE ou polyester).


- Avec code couleur

1

Code d'indication	Couleur	Longueur [cm]	Taille du cathéter (F)	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
ACC	rouge ■	80	4	1	140806	345290
ACC	blanc ■	80	5	1	140808	345240
ACC	bleu ■	80	6	1	1408010	345250

Fogarty® Cathéters vasculaires

Cathéters de thrombectomie pour greffe

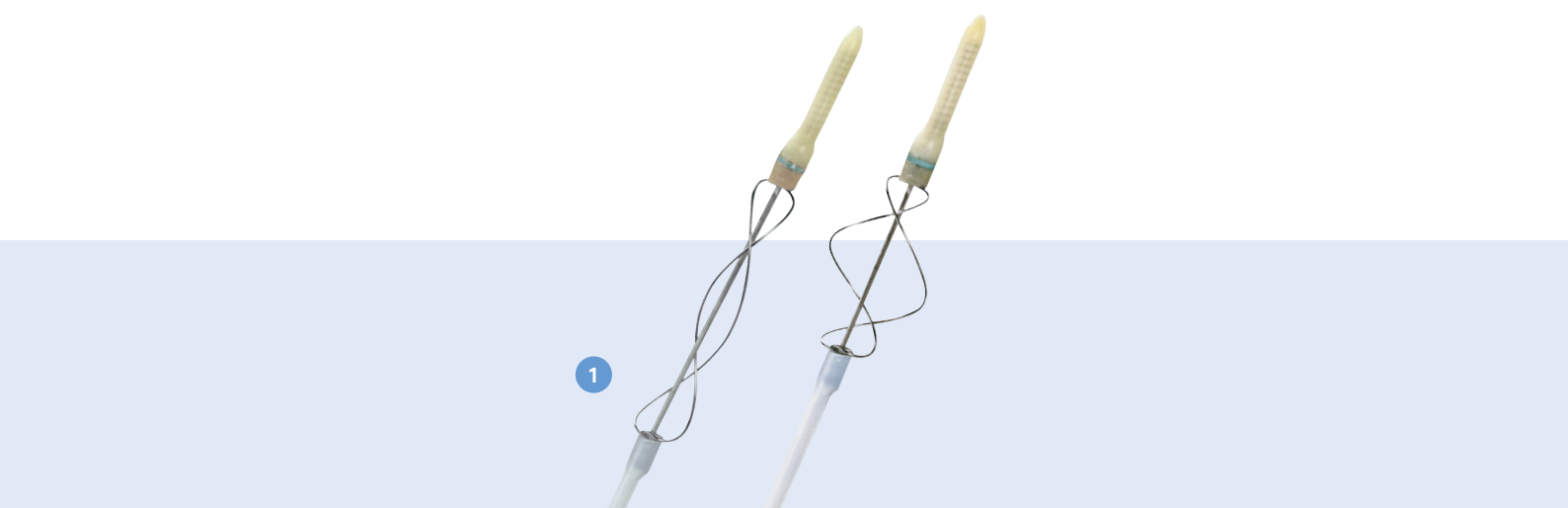

Cathéters de thrombectomie pour greffe

Pour l'élimination du matériel thrombotique robuste et adhérent des prothèses vasculaires synthétiques (ePTFE ou polyester). Ne pas utiliser dans les vaisseaux natifs !

- Avec code couleur

1	Code d'indication	Couleur	Longueur [cm]	Taille du cathéter (F)	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	GTC	blanc 	50	5	1	16-024-5F	345300
	GTC	bleu 	50	6	1	16-024-6F	345310

Pinces Hydraclips Fogarty



Pinces Hydraclips Fogarty®


Sept modèles pour une utilisation clinique optimale avec une large gamme de combinaisons de mors.

- CV5020: vaisseaux périphériques, endartériectomie carotidienne, procédures dans l'artère fémorale ou greffes synthétiques
- CV5025: vaisseaux périphériques, endartériectomie carotidienne, procédures dans l'artère fémorale, l'artère du genou, l'artère profonde et l'artère rénale ou greffes synthétiques
- CV5030: occlusion de l'aorte et de la veine cave ou procédures gastro-intestinales
- CV5040: occlusion de l'aorte et de la veine cave ou procédures gastro-intestinales
- CV5045: pince en croix aortique
- CV5050: anévrisme aortique, procédures pulmonaires ou gastro-intestinales
- CV5055: anévrisme aortique, procédures pulmonaires ou gastro-intestinales

1	Modèle	Longueur du raccord de pince [cm]	Pour longueurs de mors [mm]	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	Droite	16,5	33	1	CV5020	336800
	Droite	29,2	61	1	CV5030	336820
	Droite	31,1	86	1	CV5055	336856

2	Modèle	Longueur du raccord de pince [cm]	Pour longueurs de mors [mm]	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	Coudée	11,8	33	1	CV5025	336810
	Coudée	22,2	61	1	CV5040	336830
	Coudée	21,6	61	1	CV5045	336840
	Coudée	23,5	86	1	CV5050	336850

Combinaisons de mors pour clamps chirurgicaux de Fogarty® pour les vaisseaux à faible débit

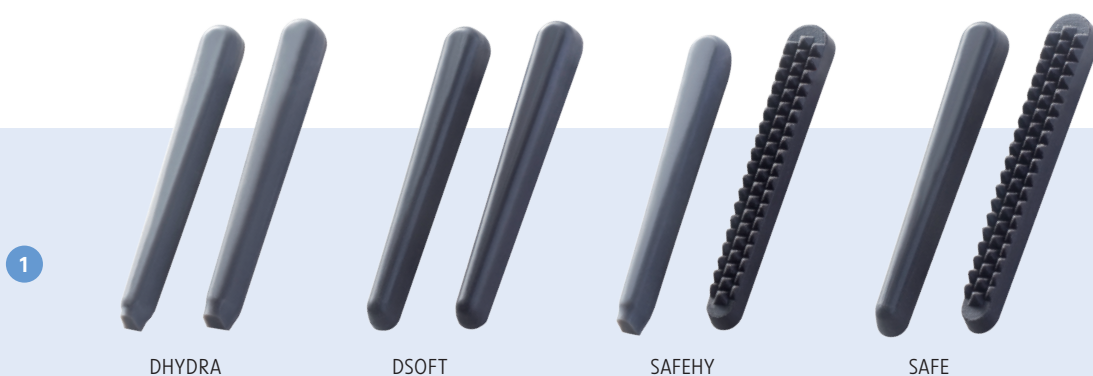


Combinaisons de mors pour les vaisseaux à faible débit

Combinaisons de mors stériles à usage unique.

- *Double Hydrjaw (DHYDRA) :*
l'ensemble de mors en caoutchouc souple remplis de silicone offre l'alternative la plus atraumatique pour les vaisseaux sanguins fragiles et délicats.
- *Double Softjaw (DSOF) :*
deux mors en caoutchouc naturel avec poches d'air pour une pression ferme et uniforme pour comprimer les vaisseaux sanguins fibreux.
- *Safejaw-Hydrjaw (SAFEHY) :*
les pyramides en caoutchouc souple des deux mors offrent une prise douce pour comprimer les vaisseaux avec des lésions calcifiées.
- *Safejaw-Softjaw (SAFE) :*
la prise en douceur du mors Safejaw et la pression ferme du mors Soft-Jaw assurent la sécurité lors de la compression de lésions nécrotiques compliquées.

1	Longueur [mm]	Paire	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	33	10	DHYDRA33	348710
	61	10	DHYDRA61	348720
	86	10	DHYDRA86	348730
	33	10	DSOF33	348740
	61	10	DSOF61	348750
	86	10	DSOF86	348760
	33	10	SAFEHY33	348770
	61	10	SAFEHY61	348780
	86	10	SAFEHY86	348790
	33	10	SAFE33	348800
	61	10	SAFE61	348810
	86	10	SAFE86	348820

Combinaisons de mors pour clamps chirurgicaux de Fogarty® pour tous les vaisseaux

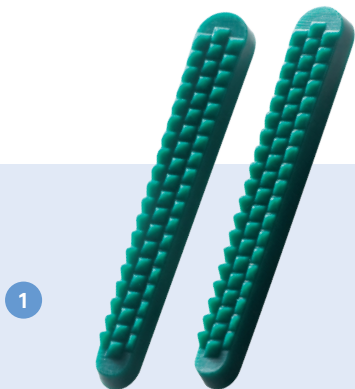

Combinaisons de mors pour tous les vaisseaux

Combinaisons de mors stériles à usage unique.

- *EverGrip (EVERGRIP) :*
le tout dernier matériau en caoutchouc synthétique avec une surface pyramidale lisse.

1	Longueur [mm]	Paire	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	33	10	Evergrip 33	336941
	61	10	Evergrip 61	336942
	86	10	Evergrip 86	336943

Combinaisons de mors pour clamps chirurgicaux de Fogarty® pour les vaisseaux à haut débit




Combinaisons de mors pour les vaisseaux à haut débit

Combinaisons de mors stériles à usage unique.

- *Hydrajaw-Tractionjaw (HYDRA) :*
les dents en polymère fermes du mors Tractionjaw et la surface lisse et souple du mors Hydrajaw offrent une bonne préhension sur les vaisseaux présentant des lésions gélatineuses.
- *Softjaw-Tractionjaw (SOFT) :*
la combinaison des mors Softjaw et Tractionjaw offre une préhension sécurisée sur les vaisseaux à plaques fibreuses.

1	Longueur [mm]	Paire	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	33	10	HYDRA33	336860
	61	10	HYDRA61	336870
	86	10	HYDRA86	336880
	33	10	SOFT33	336920
	61	10	SOFT61	336930
	86	10	SOFT86	336940

Pinces de fixation Fogarty®

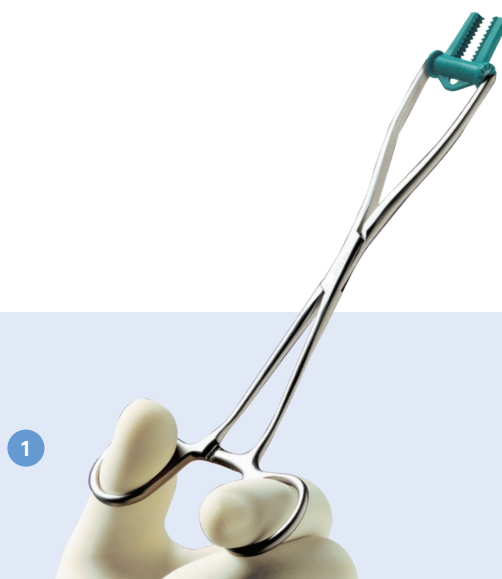

Pinces de fixation Fogarty®

Applicateur pour pinces à ressort.

1	Pour ouverture de mors [mm]	Pièce/VE	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	max. 6	1	CV5110	348650
	max 12	1	CV5111	348651

Pinces à ressort pour applicateur de Fogarty®




Pinces à ressort

- **Clip à ressort Softjaw (CSOFT) :**
les mâchoires doubles en caoutchouc doux naturel assurent une occlusion douce et sûre, en particulier dans les vaisseaux délicats et de structure irrégulière.
- **Clip à ressort Safejaw (CSAFE) :**
ce clip garantit un accès en douceur et une hémostase sûre en combinant les mâchoires Safejaw et Softjaw.
- **Clip à ressort double Safejaw (CDSAFE) :**
deux mâchoires Safejaw offrent une traction douce pour les vaisseaux sanguins faibles et fragiles.
- **Clip à ressort à mâchoire parallèle (CPARAL) :**
deux mâchoires en plastique rigide Tractionlaw garantissent une sécurité hémostatique maximale.
- **EverClip (EVERCLIP) :**
le tout dernier matériau en caoutchouc synthétique avec une surface pyramidale lisse.

1

Longueur [mm]	Paire	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
6	10	CSOFT6	348620
12	10	CSOFT12	348670
6	10	CSAFE6	348680
6	10	CDSAFE6	348690
6	10	CPARAL6	348600
12	10	CPARAL12	348610
6	10	EVERCLIP6	348655

Pinces à ressort pour applicateur de Fogarty®

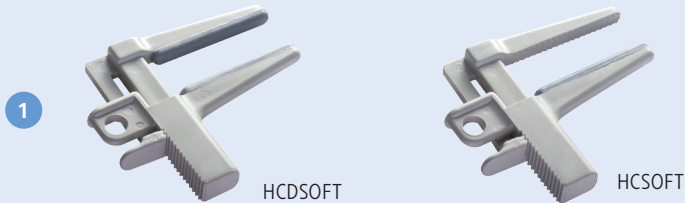

Pinces à ressort

- *Clip double Softjaw (HCDSOFT) :*
les mâchoires Softjaw peuvent être réglées pour obtenir la meilleure pression d’occlusion homogène possible. Suggestions d’application : occlusion atraumatique contrôlée des vaisseaux sensibles.
- *Clip simple Softjaw (HCSOFT) :*
la combinaison des mâchoires de Tractionjaw et Softjaw garantit un accès ferme et doux là où une traction supplémentaire est nécessaire.

1	Longueur [mm]	Paire	Identifiant du fabricant	Réf. d'article
	8	10	HCDSOFT8	348640
	10	10	HCSOFT10	348630

Mentions légales

Éditeur : medimex GmbH, In den Fritzenstücker 9–11, 65549 Limburg - Allemagne.

Photos / Sources : tous les droits ont été libérés pour le catalogue.

Mentions légales : la réimpression et la reproduction du présent catalogue, même partielles, sont soumises à l'approbation écrite de medimex GmbH.

Sous réserve des modifications de la gamme de produits.

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Sous réserve des variations d'images, de produits et de couleurs. Toutes les illustrations du présent catalogue représentent les objets au moment de l'impression, nous nous réservons le droit de procéder par la suite à des modifications techniques et autres changements.



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 