



Gefäßkatheter und Zubehör





Sehr geehrte Damen und Herren,

die medimex GmbH bietet seit über 50 Jahren exklusive Produkte für den medizinischen Bereich an. Auch in Zukunft wollen wir Ihren Ansprüchen gerecht werden: Durch Innovationen, hochwertige Qualität und vor allem durch kundenorientierten Service. Gemeinsam mit einem Netzwerk kompetenter Kooperationspartner sehen wir uns als Ihren zuverlässigen Begleiter im OP.

Durch kompetente Beratung, Flexibilität und das Engagement unserer Partner im Fachhandel sind Ihre Bedürfnisse bei medimex gut aufgehoben.

In diesem Katalog möchten wir Ihnen unser Produktsortiment über Gefäßkatheter und Zubehör vorstellen.

Besuchen Sie unsere Homepage www.medimex.de, um unser Gesamtsortiment kennen zu lernen.

Bestell- und Preisankünfte erhalten Sie über einen unserer Fachhandelspartner oder über unseren Kundenservice unter:

fon: +49.6431.7302.300

mail: kontakt@medimex.de

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr medimex-Team

Gefäßkatheter und Zubehör



Fogarty® Gefäßkatheter

Arterien Embolektomie Katheter



Arterien Embolektomie Katheter – Langpackung Standard

Der Standard zur arteriellen Thrombemboliektomie.

- farbcodiert

1	Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	EMB	violett 	60	2	1	12-060-2F	345010
	EMB	grün 	40	3	1	12-040-3FS	345130
	EMB	grün 	80	3	1	12-080-3FS	346590
	EMB	weiß 	80	5	1	12-080-5F	345030
	EMB	blau 	80	6	1	12-080-6F	345040
	EMB	gelb 	80	7	1	12-080-7F	345050

Fogarty® Gefäßkatheter

FORTIS™ Arterien Embolektomie Katheter



FORTIS™ Arterien Embolektomie Katheter


Der Fogarty® FORTIS™ Katheter ist speziell zur Anwendung im Femoralbereich gedacht, wenn eine erhöhte Zugkraft bei thrombotischem Verschluss nötig ist.

- verbesserter Schaft durch neues Kunststoffmaterial PEBAX
- erhöhte Dicke des Ballonmaterials (Latex)
- Redesign der Katheterspitze
- farbcodiert

1	Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	EMB	rot/grau 	80	4	1	12-080-4FF	348830

Fogarty® Gefäßkatheter

Okklusions Katheter

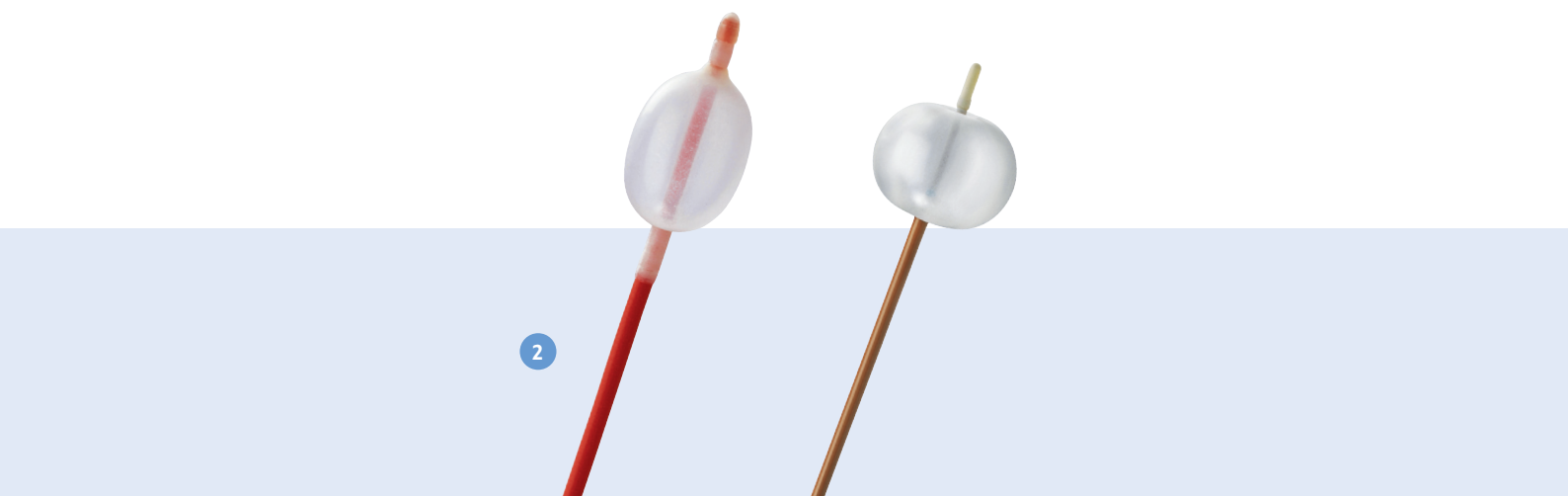

Okklusions Katheter


Zur schnellen und einfachen atraumatischen, temporären Okklusion von Gefäßen mittels Ballonkatheter.

- mit Absperrventil
- farbcodiert

2	Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	OCC	grün 	40	3	1	62-040-3F	345170
	OCC	rot 	40	4	1	62-040-4F	345340
	OCC	weiß 	40	5	1	62-040-5F	345350

Fogarty® Gefäßkatheter

Venen Thrombektomie Katheter

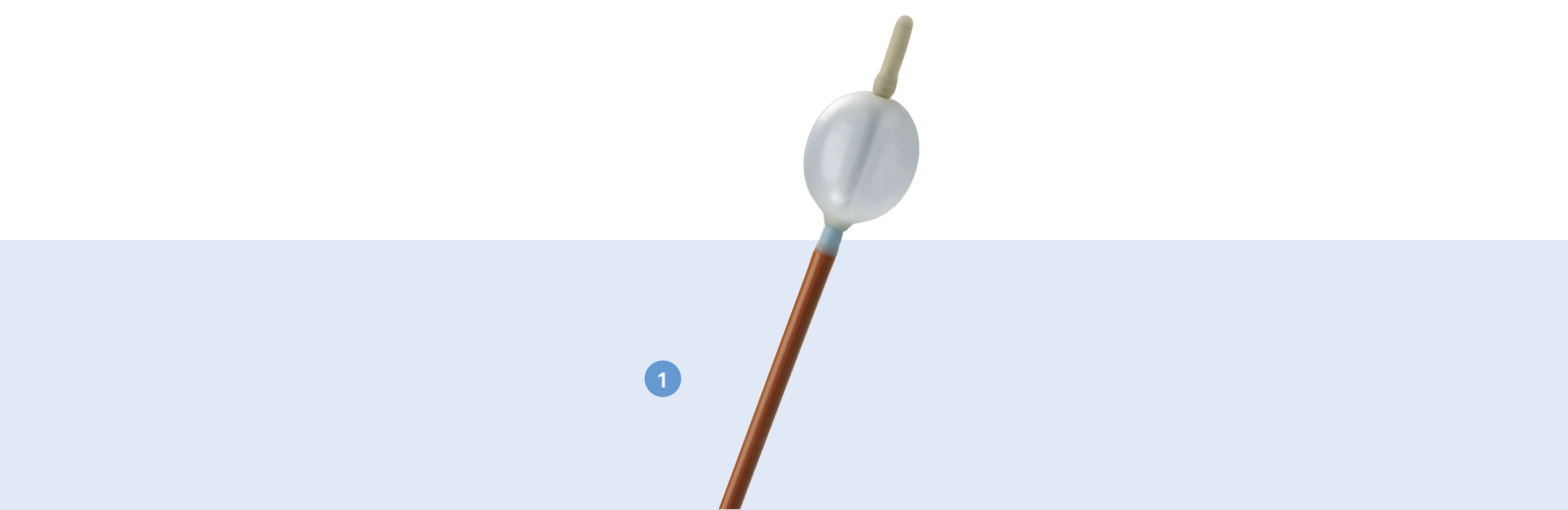

Venen Thrombektomie Katheter

Zur venösen Thrombektomie, ausgestattet mit extra langer, weicher Spitze. Auch zur temporären Okklusion geeignet.

- mit Absperrventil
- farbcodiert

1

Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
THB	blau	80	6	1	32-080-6F	345150
THB	braun	80	8	1	32-080-8F	345180
THB	braun	80	8	1	32-080-8/10F	345080

Fogarty® Gefäßkatheter

Gallengang Ballon Katheter



Gallengang Ballon Katheter

Zur Entfernung von Steinen und Gallengries aus dem Gallengangsystem sowie zur Durchführung diagnostischer Verfahren.

- farbcodiert

2

Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
BBP	weiß 	23	5	1	41-023-5F	345090
BBP	weiß 	40	5	1	41-040-5F	345160
BBP	blau 	23	6	1	41-023-6F	345100

Fogarty® Gefäßkatheter

Thru-Lumen Embolektomie Katheter



Thru-Lumen Embolektomie Katheter

Der Standard zur gezielten Thrombektomie über einen Führungsdraht. Zusätzlich Irrigation, Kontrastmittelapplikation oder lokale Lyse über die distale Öffnung sowie temporäre Okklusion von Gefäßen.

- mit Absperrventil und Ballonport
- farbcodiert

1

Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
TL/EMB	grün 	80	3	1	12TLW-80-3F	345440
TL/EMB	rot 	40	4	1	12TLW-40-4F	345360
TL/EMB	rot 	80	4	1	12TLW-80-4F	345450
TL/EMB	weiß 	80	5	1	12TLW-80-5F35	345391
TL/EMB	blau 	80	6	1	12TLW-80-6F	345410
TL/EMB	gelb 	80	7	1	12TLW-80-7F	345420

Fogarty® Gefäßkatheter

Adherent Clot Katheter



Adherent Clot Katheter

Zum Entfernen von adhärenthem, thrombotischem Material aus Arterien oder synthetischen Gefäßprothesen (ePTFE oder Polyester).


- farbcodiert

2

Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
ACC	rot 	80	4	1	140806	345290
ACC	weiß 	80	5	1	140808	345240
ACC	blau 	80	6	1	1408010	345250

Fogarty® Gefäßkatheter

Graft Thrombektomie Katheter

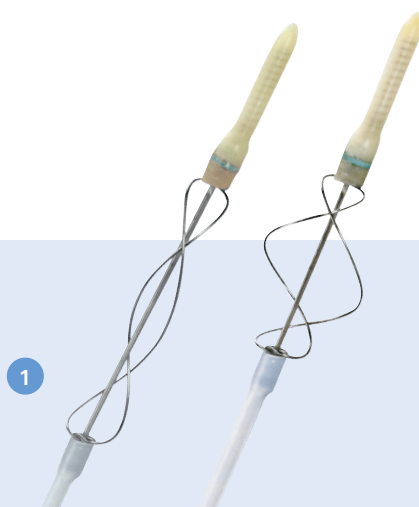

Graft Thrombektomie Katheter


Zum Entfernen von robustem, adhärentem, thrombotischem Material aus synthetischen Gefäßprothesen (ePTFE oder Polyester).
Nicht in nativen Gefäßen anwenden!

- farbcodiert

1	Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	GTC	weiß 	50	5	1	16-024-5F	345300
	GTC	blau 	50	6	1	16-024-6F	345310

Maulteil-Kombinationen für Fogarty® Gefäßklemmen für Gefäße mit niedrigem Durchfluss

2

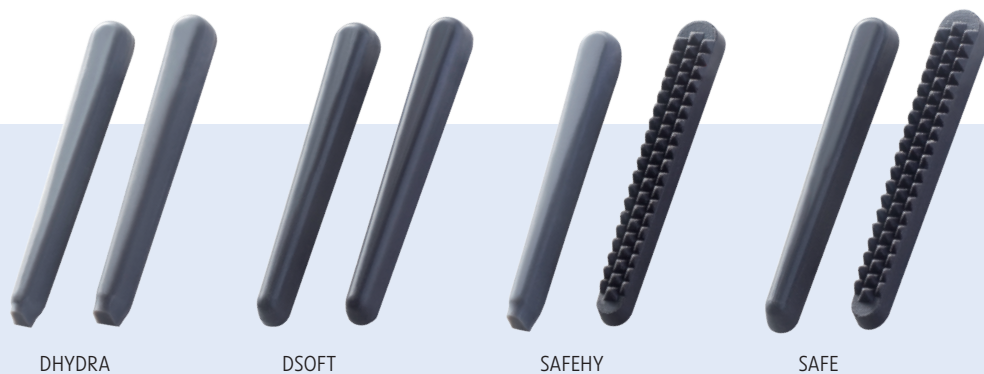

Maulteil-Kombinationen für Gefäße mit niedrigem Durchfluss


Sterile Maulteil-Kombinationen für den Einmalgebrauch.

- **Doppel-Hydrajaw (DHYDRA):**
Das Set aus silikongefüllten Weichgummi-Maulteilen bietet die atraumatischste Alternative für delicate und brüchige Blutgefäße.
- **Doppel-Softjaw (DSOFT):**
Zwei Naturkautschuk-Maulteile mit Luftein-schlüssen für festen und gleichmäßigen Druck zum Abklemmen fibröser Blutgefäße.
- **Safejaw-Hydrajaw (SAFEHY):**
Die weichen Gummipyramiden der beiden Maulteile bieten sanften Halt, um Gefäße mit verkalkten Läsionen abzuklemmen.
- **Safejaw-Softjaw (SAFE):**
Der sanfte Halt des Safejaw-Maulteils sowie der feste Druck des Softjaw-Maulteils geben Sicherheit beim Abklemmen komplizierter, nekrotischer Läsionen.

2

Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
33	10	DHYDRA33	348710
61	10	DHYDRA61	348720
86	10	DHYDRA86	348730
33	10	DSOFT33	348740
61	10	DSOFT61	348750
86	10	DSOFT86	348760
33	10	SAFEHY33	348770
61	10	SAFEHY61	348780
86	10	SAFEHY86	348790
33	10	SAFE33	348800
61	10	SAFE61	348810
86	10	SAFE86	348820

Maulteil-Kombinationen für Fogarty® Gefäßklemmen für alle Gefäße

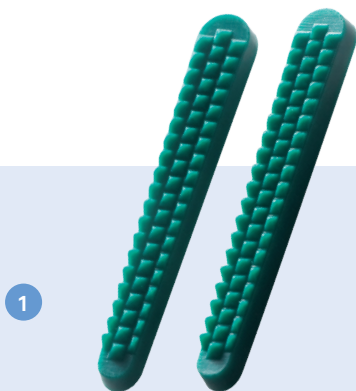


Maulteil-Kombinationen für alle Gefäße

Sterile Maulteil-Kombinationen für den Einmalgebrauch.

- *EverGrip (EVERGRIP):*
Das neueste, synthetische Gummimaterial mit einer weichen Pyramidenoberfläche.

1	Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	33	10	Evergrip 33	336941
	61	10	Evergrip 61	336942
	86	10	Evergrip 86	336943

Maulteil-Kombinationen für Fogarty® Gefäßklemmen für Gefäße mit hohem Durchfluss

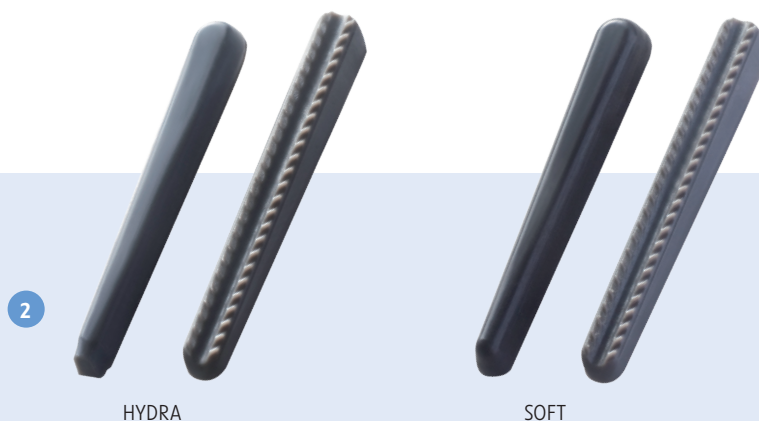

Maulteil-Kombinationen für Gefäße mit hohem Durchfluss

Sterile Maulteil-Kombinationen für den Einmalgebrauch.

- **Hydrajaw-Tractionjaw (HYDRA):**
Die festen Polymer-Zähne des Tractionjaw-Maulteils und die glatte, weiche Oberfläche des Hydrajaw-Maulteils sorgen für einen festen Griff bei Gefäßen mit gelantinösen Läsionen.
- **Softjaw-Tractionjaw (SOFT):**
Die Kombination aus Softjaw- und Tractionjaw-Maulteilen bietet sichersten Griff bei Gefäßen mit fibrösen Plaques.

2	Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	33	10	HYDRA33	336860
	61	10	HYDRA61	336870
	86	10	HYDRA86	336880
	33	10	SOFT33	336920
	61	10	SOFT61	336930
	86	10	SOFT86	336940

Federklemmen für Fogarty® Anlegezange



Federklemmen

- **Softjaw-Federclip (CSOFT):**
Doppelte Backen aus natürlichem Weichgummi bieten sanfte und sichere Okklusion, speziell bei zarten und unregelmäßig strukturierten Gefäßen.
- **Safejaw-Federclip (CSAFE):**
Dieser Clip gewährleistet einen sanften Zugriff mit sicherer Hämostase durch die Kombination von Safejaw- und Softjaw-Backen.
- **Doppel-Safejaw-Federclip (CDSAFE):**
Zwei Safejaw-Backen bieten sanfte Traktion für prekäre und brüchige Blutgefäße.
- **Parallelbacken-Federclip (CPARAL):**
Zwei Tractionjaw-Backen aus Hartplastik sorgen für maximale hämostatische Sicherheit.
- **EverClip (EVERCLIP):**
Das neueste, synthetische Gummimaterial mit einer weichen Pyramiden

1

Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
6	10	CSOFT6	348620
12	10	CSOFT12	348670
6	10	CSAFE6	348680
6	10	CDSAFE6	348690
6	10	CPARAL6	348600
12	10	CPARAL12	348610
6	10	EVERCLIP6	348655

Federklemmen für Fogarty® Anlegezange



Federklemmen

- *Doppel-Softjaw-Clip (HCDSOFT):*
Die Softjaw-Backen können so eingestellt werden, dass der bestmögliche, gleichmäßige Okklusionsdruck erzielt wird. Anwendungsvorschläge: Kontrollierte, atraumatische Okklusion empfindlicher Gefäße.
- *Single-Softjaw-Clip (HCSOFT):*
Die Kombination von Tractionjaw- und Softjaw-Backen gewährleistet einen festen und doch sanften Zugriff genau dort, wo zusätzliche Traktion benötigt wird.

2

Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
8	10	HCDSOFT8	348640
10	10	HCSOFT10	348630

Notizen:

Impressum

Herausgeber: medimex GmbH, In den Fritzenstücker 9–11, 65549 Limburg.

Fotos/Quellen: Alle Rechte wurden für den Katalog freigegeben.

Rechtshinweise: Nachdruck und Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch medimex GmbH gestattet. Sortimentsänderungen vorbehalten.

Keine Haftung bei Druckfehlern. Bild-, Produkt- und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Abbildungen dieses Kataloges geben die abgebildeten Gegenstände zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, spätere technische und sonstige Änderungen behalten wir uns vor.

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

